

KLAXON®



TWIST

Dołącz do rewolucji!

Dzień z Twistem



08:00

Dzień dobry!

Zacznij dzień z Twistem!



08:30

Dzisiaj jest dzień treningu!

Marta jedzie na siłownię z Twistem zamontowanym z przodu, aby bezpiecznie poruszać się na zewnątrz i mieć wolne ręce.



20:30

Lot do Londynu

Twist, przechowywany w torbie, jest niezwykle praktyczny do przenoszenia i może podróżować samolotem z Pietro. Twist jest lekki i idealny do zabrania na wszystkie wycieczki!



19:30

Zakupy na ostatnią chwilę

Twist to idealne rozwiązanie: jest kompaktowy i zwrotny nawet w ciasnych pomieszczeniach, takich jak sklep wolnoctwoy na lotnisku.



18:30

Emocje to radość

Ciesz się niezapomnianymi chwilami, trzymając się za ręce z bliskimi o zachodzie słońca! Z Twistem dotrzesz do najbardziej romantycznych miejsc!

08:35

kontrola i ustawienia

Z aplikacją Klaxon® App możesz ustawiać prędkość i parametry hamowania. Sprawdzić stan naładowania baterii i dużo więcej!



09:35

Trening szermierki

Marta jest zawodniczką szermierki. Twist jest dla niej idealny, ponieważ między meczami potrafi podłączyć i rozłączyć go w jedną chwilę.



11:30

Czas na kawę

Twist na froncie w miejskiej dżungli w łatwy sposób radzi sobie z niedogodnościami miejskich nawierzchni. Pietro może dopasować prędkość dzięki intuicyjnemu i ergonomicznemu sterownikowi.



16:00

Wspólna zabawa

Manuel jest tatą nie do pokonania! Wolny czas spędza w ekscytujących wyścigach z Eriką. Twist jest zwinny, praktyczny i zapewnia radość!



15:30

W poszukiwaniu ulotnej chwili

Massimo to malarz, który czerpie inspirację z mieniących się kolorów. Z kierownicą z przodu Twist jedzie szybciej!





TWIST to 6 urządzeń w 1 !

TWIST FDM - (Front Drive Manual).

Podłącz Twista do swojego wózka z przodu i korzystaj z funkcji jakim jest klasyczny FreeWheel - trzecie koło, które ułatwia jazdę w warunkach terenowych. Trawa, piasek, wyboisty i nierówny teren już nie są nie do pokonania.

TWIST FDE - (Front Drive Electric).

Podłącz przez Bluetooth do Twista Kontroler i korzystaj z funkcji jakim jest FreeWheel w wersji elektrycznej. Od teraz bez wysiłku pokonasz teren. pozostaje jedynie sterować obręczami, w którym kierunku chcesz się udać.

TWIST FDE - (Front Drive Electric).

Przestaw Kontroler na rączkę do pchania. I zmień funkcję TWIST-a na urządzenie wspomagające dla asystenta. Bez żadnego wysiłku i bezpiecznie osoba asystująca może pchać i kontrolować wózek w każdym terenie.

1



2



3



4



5



6



TWIST RDE - (Rear Drive Electric).

Podłącz Twista do swojego wózka z tyłu pod siedzeniem. Połącz przez bluetooth z kontrolerem i korzystaj z funkcji elektrycznego napędu. Pozostaje tylko sterować obręczami i cieszyć się jazdą bez wysiłku na dłuższe dystanse.

TWIST RDE - (Rear Drive Electric).

Kiedy przełożysz kontroler na rączki do pchania zamienisz swojego TWIST-a w klasyczny elektryczny napęd dla asystenta. Osoba towarzysząca bez wysiłku może kontrolować zjazdy i podjazdy z pochylni. Tempomat utrzyma prędkość na ustawionym poziomie.

TWIST FDE - (Front Drive Electric).

Zamontuj do Twista kierownicę i korzystaj z przystawki, która daje większe możliwości w poruszaniu się w terenie. Wiatr we włosach i ahoj przygodo!

“Wiele” funkcji Twist!

Różne możliwości użycia

Twist zamontowany z przodu zapewnia relaksującą i bezpieczną jazdę na świeżym powietrzu. Wybierz prędkość za pomocą kontrolera i poruszaj się bez użycia rąk. Podłącz kierownicę i jedź szybciej w pełnym komfortie! Montowany z tyłu Twist jest idealny do użytku w pomieszczeniach.



Lekki i zwrotny

Twist jest zwinny. Obraca się o 360° i jest idealny do wąskich przestrzeni. Zintegrowana ergonomiczny uchwyt ułatwia chwytanie i transport. Dbamy o każdy szczegół.

Szybkie i łatwe wpinanie

Twista można podłączyć i rozłączyć w kilka sekund i całkowicie samodzielnie. Twist to rozwiązanie dla Twojej niezależności mobilnej. Odkryj nowe uczucie wolności bez rezygnacji z komfortu poruszania się na wózku.




Kompaktowy i przenośny

Odkrywaj nowe miejsca z Twist. Odkryj przyjemność podróżowania jak nigdy dotąd! Twist jest kompaktowy i lekki i można go przetransportować samochodem, pociągiem lub samolotem.

Stylowy, technologiczny i bezprzewodowy

Połącz system jazdy przez Bluetooth. Kontroluj i konfiguruj ustawienia wstępne bezpośrednio z aplikacji Klaxon® App. Nic nie stoi na przeszkodzie by czuć się wolnym!

Twist jest fajny i elegancki, idealny i stylowy w poruszaniu się .

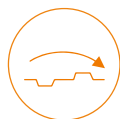

Do wszystkich rodzajów terenu

Twist z łatwością pokonuje codzienne przeszkody. Skutecznie radzi sobie na podjazdach. Zamontowany z przodu podnosi przednie koła wózka i umożliwia poruszanie się po każdym terenie.

Bezpieczeństwo

Twist wykonany jest z wysokiej jakości materiałów i spełnia wymagania technologiczne i innowacyjności. Został zaprojektowany, aby towarzyszyć Ci przez cały czas, zapewniając pełne bezpieczeństwo i trwałość. Zintegrowane światła LED do jazdy w nocy!



System wpinania Klaxon®

Innowacyjny system wpinania może być zamontowany na każdym typie wózka inwalidzkiego, na ramie sztywnej lub składanej.

Elementy składowe kompletnego zestawu

TWIST

Jednostka napędowa która składa się z : komputera sterującego, silnika , zintegrowanego oświetlenia LED, ergonomicznego uchwytu.



Demontowalna bateria

Twist jest jeszcze lżejszy i łatwiejszy w obsłudze dzięki wymiennej i demontowalnej baterii.



Kontroler

Wystarczy jedno dotknięcie dźwigni, aby ruszyć i wybrać wstępnie ustawioną prędkość. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby zahamować.



Składana kierownica

Kierownica , praktyczna i łatwa w transporcie.



Klema do podłączenia tylnego


UWAGA! możliwość montażu tylko do wózków z belką osi kół tylnych i do wózka z kołami tylnymi 24"




Adapter podłączenia przedniego



Łącznik pod siedzisko

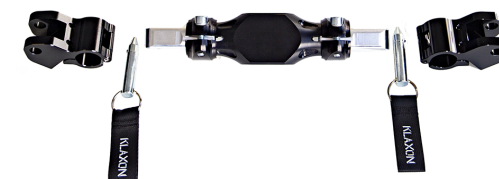

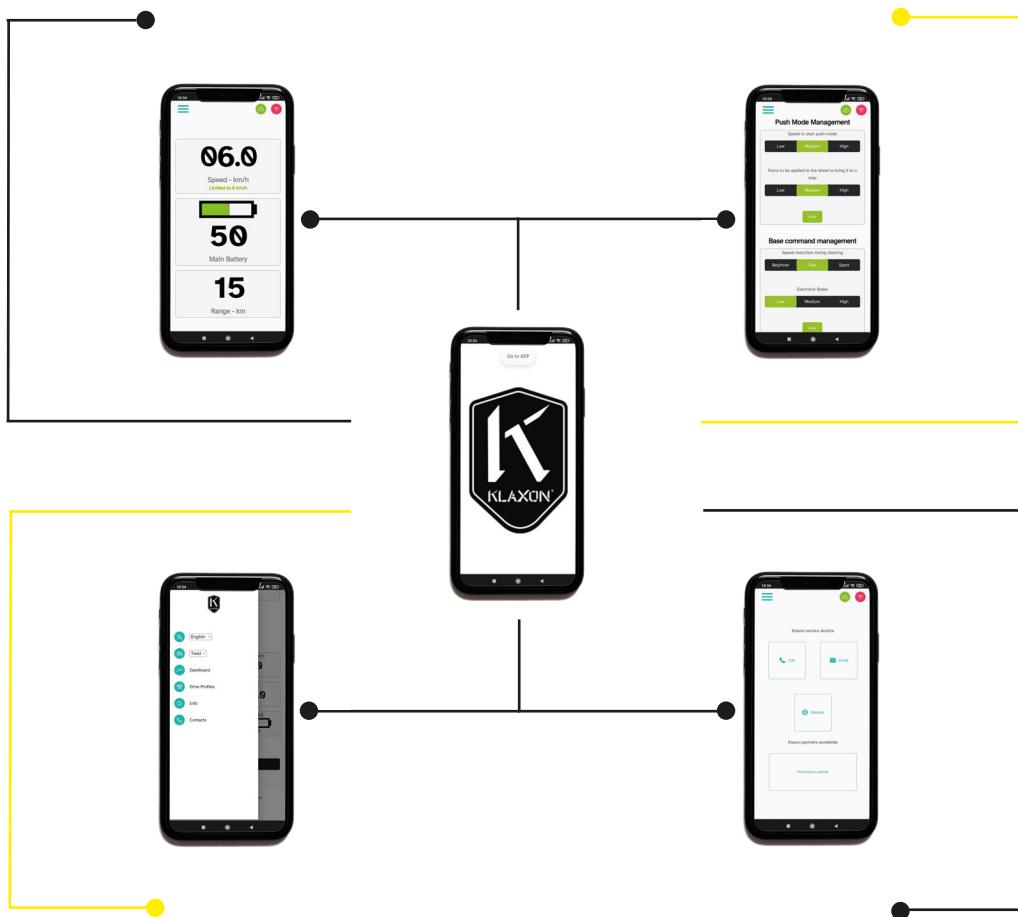

Aplikacja Klaxon® App

Wybierz swoje ulubione ustawienia jazdy za pomocą smartfona. Pozostań połączony!

Dane

Materiał	Aluminium
Silnik	36V x 750W bez szczotkowy
Koło	10" opona z gładkim bieżnikiem
Hamulce	sterownikiem: System Hamulca Electronicznego manualny: 150 mm hamulec mechaniczny
Prędkość jazdy	Bez kierownicy: 6 km/h Z kierownicą: 15 km/h
Bateria	Litowa 36V x 4Ah (waga 1.5 kg) Czas ładowania: ~ 2h
Zasięg	~ 20 km (z umiarkowaną prędkością, na równej nawierzchni i wagą użytkownika 70 kg)
Waga	7.5 kg (bez baterii)
Podłączenie	Możliwe opcje: Centralny Linking System Klaxon® Boczny Linking System Klaxon® Tyłny Linking System Klaxon®
Wymiary	Twist: Szer. 15 cm x Wys. 34 cm x Dł. 31 cm Z kierownicą: Szer.. 45 cm x Wys. 94 cm x Dł. 42 cm
Technologia	Downhill Speed Control (w trybie kontrolera), Intelligent Cruise Control (w trybie kontrolera), Electronic Brake System
Akcesoria w zestawie	Bateria, Ładowarka baterii, Oświetlenie przednie, Oświetlenie tylne
Zawiera usługę	Aplikacja Klaxon® App
Opcje	Kontroler, Kierownica, Dodatkowa bateria



KLAXON Mobility GmbH

Industriestrasse 1
9601 Arnoldstein (Austria)
+43 664 4681294
info@klaxon-klick.com
www.klaxon-klick.com

Dystrybucja:

VERMEIREN Polska
Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica Polska
T + 48 713874200
info@vermeiren.pl
vermeiren.pl



we care for you



@klaxonklick



@klaxonklickworld



Klaxon Mobility GmbH



Klaxon Klick